


Limpeza com resultado certo

Trate seus pacientes com o KaVo ULTRAscaler tendo economia de tempo e maior eficiência O KaVo ULTRAscaler garante a seus pacientes uma limpeza dentária de grande precisão e rendimento naquelas zonas especialmente delicadas.



O desenho leve e ergonômico oferece um tratamento em ótimas condições para os seus pacientes.

Possui variação de potência, permitindo maior conforto ao paciente durante o tratamento. O instrumento é acionado por células piezo elétricas, que produzem uma frequência de movimento nas ponteiras de 30.000 Hz.

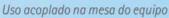



Movimento linear. O ângulo de aplicação da ponteira em relação ao dente influencia o resultado final do procedimento, o que possibilita ao profissional escolher a melhor forma de tratamento.

Acompanha 04 ponteiras de série exclusivas:



01 Ponteira P1

Indicada para os casos simples, como destartarização



02 Ponteiras G1

Indicada para a eliminação de depósitos supragengivais. Aplicação nas facetas linguais e palatinas.



01 Ponteira G2

Indicada para remoção de depósitos supragengivais volumosos.



135°C

Instrumento destacável e autoclavável a 135°.

Frequência de 30,000 Hz

Possui movimento linear, para ótimo rendimento

Profilaxia profissional: você e seus pacientes mais satisfeitos

O KaVo ULTRAjet Flex é um produto admirado e utilizado pelos profissionais mais exigentes.

Tecnologia consagrada no mundo há mais de 5 anos. Todo esse sucesso se dá pela sua alta performance e confiabilidade.

Você irá realizar procedimentos de forma rápida e fácil, obtendo resultados perfeitos e ainda com economia de pó.

Com o KaVo ULTRAjet Flex você terá a garantia de satisfação do seu paciente durante e após o procedimento.

E seu trabalho terá maior rendimento, ergonomia e funcionalidade com o uso deste produto.



Profilaxia pode ser simples assim!

Tratamento mais confortável

Para pacientes mais sensíveis à dor, graças ao sistema de ajuste da vazão do pó.



Resultados mais eficientes

A ponteira do ULTRAjet Flex é exclusividade KaVo. Projetada de forma inteligente, garante um jato de pó mais concentrado, eficiente e com menos sujeira.



Manuseio simples e rápido

Recarga de pó e limpeza do aparelho rapidamente realizadas. Controle seu ULTRAjet Flex utilizando o pedal de comando do seu Equipo.



Diferenciais de um produto exclusivo


A ponteira exclusiva concentra o jato de pó para polimento ideal e com menos sujeira.

Fácil manutenção graças a transmissão linear do pó entre reservatório e ponteira.

O reservatório de pó, fabricado em polímero de alta qualidade, pode ser facilmente removido, limpo e seco. A ponteira pode ser removida para limpeza, desinfecção e esterilização.

A área de pega possui giro livre, o que significa acesso a qualquer quadrante da boca.

Totalmente esterilizável a 135°C em autoclave. Utiliza conexão MULTIflex.

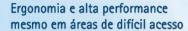

A ponteira possui giro de 360°, favorecendo a ergonomia e proporcionando excelentes resultados mesmo na região dos dentes molares.

LANÇAMENTOKaVo ULTRAjet Flex





Conexão MULTIflex compativel com os modelos com e sem Luz*





Confortável para seus pacientes.

Mais e mais pacientes compreendem a necessidade da profilaxia regular, para manutenção da saúde dos dentes e gengiva. A preferência é por um tratamento mais confortável. O KaVo SONIC é fácil de usar e permite um cuidado suave – a peça de mão perfeita para profilaxia. Você aumenta a fidelidade do cliente e se beneficia da tendência de prevenção em longo prazo.

Pacientes que são tratados confortavelmente tem prazer em voltar.

O KaVo SONIC oferece a seus pacientes um tratamento muito suave.

A ponteira forma um traçado elíptico ao vibrar. Possui secção transversal quadrada com corte nas quatro arestas, que torna o tratamento mais fácil de realizar. Com a baixa pressão de aplicação da peça de mão sobre o dente, a geração de calor é minimizada e o tecido dentário protegido. Em todos os níveis de desempenho, o tratamento com o KaVo SONIC é visivelmente mais agradável e conserva saudável o tecido dentário.



Movimento elíptico. Independente do ângulo de aplicação do instrumento no dente, a remoção de tártaro ocorre sempre da mesma forma.



Conforto para o Paciente: características e vantagens excepcionais

Acoplado diretamente na mangueira do equipo funciona com ar comprimido.

Tratamento agradável

Assegura o tratamento minimamente invasivo

Preserva o tecido do dente

Oscilações moderadas, particularmente adequadas aos pacientes

sensíveis à dor

Baixa geração de calor

Entenda as diferenças e vantagens: SONIC x UI TRAscaler

		SONIC	ULTRAscaler
	Funcionamento	Pneumático	Elétrico
	Frequência de oscilação	6.000 Hz	30.000 Hz
	Acoplamento	Conectado facilmente a mangueira do equipo (acoplamento Borden ou MULTIflex)	Acoplado no equipo com instalação prévia de placa eletrônica
	Modelos de ponteira disponíveis	1 modelo - Universal	3 modelos - P1, G1 e G2
	Movimento da ponteira	Elíptico	Linear





Viva a melhor experiência da odontologia.



KaVo e Kerr, juntas e com o mais completo portfólio para equipar seu consultório.

Só uma marca líder e reconhecida por profissionais de odontologia de todo o mundo pode proporcionar a você uma experiência cada vez mais completa. Além da alta tecnologia em instrumentos, equipamentos e diagnóstico por imagem, a Kerr se une à KaVo para oferecer também as melhores opções em materiais dentários.

Nossos produtos são projetados tendo você em mente. Eles são inteligentes, para que você possa trabalhar com mais inteligência. Eles são eficientes, para que você possa otimizar o seu fluxo de trabalho. Eles são confiáveis, para que você fique mais confiante em seu resultado - o que lhe permite viver mais a vida fora do consultório.

A KaVo cuida para que paciente e dentista estejam sempre em ótimas condições de higiene, ergonomia e tenham uma proteção segura contra infecções durante todo o tratamento.

Nossos produtos proporcionam ao paciente conforto e segurança e ao profissional maior confiança e comodidade durante o seu trabalho.

Já a Kerr, com sua linha de consumíveis, foca em compósitos, adesivos, materiais de moldagem, cimentos e acessórios para restaurações e profilaxia e tem descoberto novos caminhos trazendo o que há de melhor em produtos.

Temos uma relação de reciprocidade com os dentistas. Quando os clientes falam, nós escutamos e continuamos a desenvolver produtos que ajudem o seu trabalho a ficar ainda melhor.

O Grupo KaVo Kerr oferece os produtos e soluções mais abrangentes, tudo o que o profissional da Odontologia usa em seu trabalho diário. Cada produto e cada marca complementa a outra. E cada uma faz com que você se sinta melhor em relação ao seu desempenho. Nosso objetivo é transformar inspiração em sucesso. Você pode vêla em nossos processos e em nossos produtos. Você pode senti-la em seu trabalho.

Seu trabalho deve funcionar como você quer - com o melhor de sua habilidade. Cada pessoa. Cada peça de equipamento integra-se com a seguinte. Cada marca conecta você com seus pacientes e todo o processo funciona. No final, o seu trabalho é um reflexo de você. Ele deve inspirar confiança. Ele deve comunicar confiança. Ele deve funcionar.

Grupo KaVo Kerr. Inspiring Best Practices.



















